

SINGLE-LET™NEXT: Die sterile Einweg-Sicherheitslanzette^{1,2}

Ihre Vorteile mit SINGLE-LET™NEXT:

SICHERHEIT

- TRBA250 konform
- Schützt Sie und Ihre Patienten vor versehentlichen Nadelstichverletzungen

KOMFORT

- Die silikonbeschichtete 28-Gauge-Nadel und die feste Einstichtiefe von 1,5 mm sorgen für zusätzlichen Patientenkomfort

EINFACHE ANWENDUNG

- Einfache Bedienung in nur 2 Schritten: drehen und drücken (siehe Rückseite)

Die Nadel wird **automatisch zurückgezogen und arretiert**, um eine **Wiederverwendung auszuschließen**

Gamma-sterilisierte **28-Gauge-Nadel**

1,5 mm Einstichtiefe

Auslöseknopf mit einer geriffelten Fingermulde^{3,4}

Ergonomische Form mit zusätzlichen Seitenflügeln für einen **sicheren Halt**^{3,4} beim Tragen von Handschuhen


Die lange Schutzkappe garantiert eine **sterile Nadel** und sorgt für ein **einfaches Abdrehen der Kappe**^{3,4}

Medizinprodukt für qualifiziertes Fachpersonal

Die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Produktgröße

1. HTL-STREFA S.A. Data on file. TDS of Single-Let™ Next type 520 safety lancets. 2. Simulated Clinical Use Testing to Evaluate Sharps Injury Prevention Features of HTL-STREFA's safety lancet type 520. Study report; dated 2019-02-12. 3. HTL-STREFA S.A. Data on file. Clinical study report version 1.0 according to the Study Protocol 02Lan2017, April 24, 2018 (appendix) 4. Janus-Dziedzic K, Zurawska G, Banys K., Morozowska J. The impact of needle diameter and penetration depth of safety lancets on blood volume and pain perception in 300 volunteers: A randomized controlled trial. J Med Lab Diagn 2019 Jan Vol 10 (1), pp 1-12

SINGLE-LET™NEXT: Bedienung in nur 2 einfachen Schritten*

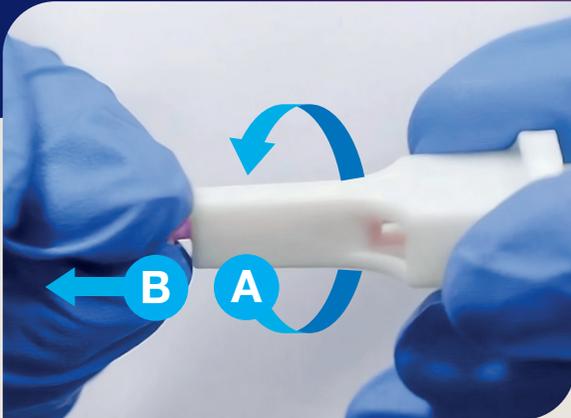

1

Schutzkappe **drehen** (A) und dann gerade **abziehen** (B).



2

Fest an der gewünschten Einstichstelle ansetzen und den Auslöseknopf **drücken**.

Ascensia Diabetes Service:
0800 / 72 61 880 (kostenfrei)
info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de

ACHTUNG: Nur für die Entnahme von Blutproben aus den Fingern verwenden.
Sterile Lanzetten - nicht verwenden, wenn die Schutzkappe vorher von der Lanzette entfernt wurde.
Reinigen Sie die Einstichstelle gemäss Ihren Sicherheitsvorschriften.
Lanzetten nach Gebrauch nicht wiederverwenden.

* Vollständige Anweisungen und Sicherheitshinweise finden Sie auf der Packung von SINGLE-LET™NEXT.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour, and Single-Let are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2025 Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH · Ascensia Diabetes Service · 51355 Leverkusen



PZN: 19371785

92001836 02/25